

Oxivir Excel Foam Acti

Klar-til-brug rengørings- og desinfektionsmiddel til hårde overflader samt overflader på ikke-invasiv medicinsk udstyr


Beskrivelse

Oxivir Excel Foam Acti, baseret på AHP-teknologi, er det ideelle produktvalg til rengøring og desinfektion i ét trin. Et brugsklart skumsprayprodukt til alle anvendelsesområder til rengøring og desinfektion af hårde overflader samt overflader på ikke-invasiv medicinsk udstyr (kun til professionel brug).

Egenskaber

- Klar til brug skumspray, ideelt produkt til alle anvendelsesområder, herunder sundhedssektoren, ikke-sundhedssektoren og fødevarerektoren.
- Fuldstændig virucid
- Hurtig dræbende virkning på et bredt spektrum af vira, bakterier og gær
- Overlegen rengøring med højtydende overfladeaktivt system
- Parfumefri
- Afskylning ikke nødvendig
- Nedbrydes aktivt til vand og ilt
- BPR-godkendt biocid
- Certificeret medicinsk udstyr


CE
0044

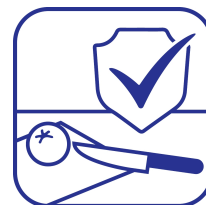

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



BPR
APPROVED

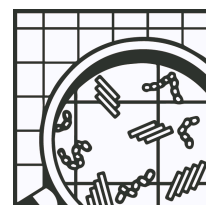

© A.I.S.E

Oxivir Excel Foam Acti

Fordele

- Oxivir Excel Foam Acti har bredspektret virkning mod bakterier, gær og vira ved kort kontaktstid og giver den højeste grad af desinfektion mod flere problematiske patogener
- BPR-godkendt og omfattende testet i henhold til europæiske normer
- Oxivir Excel Foam Acti har en fuldstændig virucid virkning, herunder dokumenteret effektivitet mod ikke-kapslede vira såsom polio, adeno, murint norovirus og kapslede vira såsom coronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV og influenza.
- Oxivir Excel Foam Acti har en overlegen rengøringsevne takket være de kraftige overfladeaktive stoffer, der gør det ikke kun til et fremragende desinfektionsmiddel, men også til et fremragende rengøringsmiddel.
- AHP-formuleringen er skånsom mod overflader, forlænger udstyrets levetid og efterlader ingen kraftige rester på overfladen
- Oxivir Excel Foam Acti er velegnet til daglig rengøring og desinfektion af hårde overflader samt til brug i områder med megen berøring i detailhandlen, uddannelses-, fødevarer-sektoren, plejehjem og andre sektorer samt i højrisikoområder på hospitaler såsom operationsstuer, intensivafdelinger, neonatalafdelinger og patientstuer
- Intet krav om PPE, medmindre det skal bruges i længere tid

Brugsanvisning

Skumsprøjtning (små overflader) og spredning med en gennemvædet klud, brug ved stuetemperatur:

- Fjern groft snavs.
- Påfør produktet ved at fugte den ikke-porøse overflade og/eller det ikke-invasive medicinske udstyr fuldstændigt.
- Lad det virke i 5 minutter.
- Lad det lufttørre. Overfladen behøver ikke skylles.
- Vask hænder efter håndtering.

Tekniske data

Udseende:	Klar gul til farveløs væske
Duft:	Neutral
pH-værdi (ufortyndet):	≈ 1.95
Relativ massefylde (20°C):	≈ 1.
Holdbarhed:	2 år efter produktion (Udløbsdato: se emballage)
Aktiv stof:	0,36% hydrogenperoxid

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

Fuldstændig vejledning i håndtering og bortskaffelse af dette produkt findes i et separat sikkerhedsdatablad; sds.solenis.com. Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Holdes væk fra mad, drikkevarer og dyrefoder. Blandes ikke med andre produkter, medmindre Diversey anbefaler det. Opbevares i originale, lukkede beholdere væk fra ekstreme temperaturer. Produktet er ikke beregnet til genbrug. Kun til professionelle brugere/specialister.

Oxivir Excel Foam Acti

Advarsel

Opbevares inden for følgende temperaturområde: 6 °C - 35 °C. Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Holdes væk fra sollys. Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som ikke anses som målgruppe. Advarsel: Kan være ætsende for metaller.

Personlige værnemidler

Fuldstændig vejledning om personlige værnemidler til dette produkt findes i et separat sikkerhedsdatablad; sds.diverseym.com.

PPE: Brug personligt beskyttelsesudstyr efter behov. **Håndbeskyttelse:** Skyl og tør hænderne efter brug. Ved længerevarende kontakt kan det være nødvendigt at beskytte huden.

Forhold vedrørende bortskaffelse

Fuldstændig vejledning om bortskaffelse af dette produkt findes i et separat sikkerhedsdatablad; sds.diverseym.com.

Produktkompatibilitet

Oxivir Excel Foam Acti er beregnet til brug som desinfektionsmiddel til hårde overflader, herunder hårde overflader på ikke-invasiv medicinsk udstyr. Under anbefalede brugsbetingelser er Oxivir Excel Foam Acti egnet til brug på overflader såsom rustfrit stål, krom, vinyl, nylonstoffer, laminerede overflader, glas, gummi, hårde og fleksible plastmaterialer (polypropylen, polyurethan, polyethylen, PVC-akryl, glasfiber og polycarbonat). Anvendelse til andre formål end de angivne anbefales ikke. Oxivir Excel Foam Acti er ikke beregnet til brug på invasiv medicinsk udstyr. **Må ikke blandes med andre produkter. Ikke beregnet til porøse eller syrefølsomme overflader.**

Mikrobiologiske data

Anvendelsesområde: PT2 Sundhedssektorer under snavsede forhold, PT2 Ikke-sundhedssektorer under snavsede forhold & PT4 Fødevarerkontaktflader under snavsede forhold

Anvendelse	Krav	EN Norm	Organismer	Opløsning	Kontakttid
Skum - Spray og valgfrit aftørring	Bakteriedræbende	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU's vaskemiddelforordning, EF 648/2004.

Godkendelser

- Biocid: BPR EU-0032483-0002 1-2
- Notificeret organ for medicinsk udstyr: CE0044

Oxivir Excel Foam Acti

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
60050969	OXIVIR EXCEL FOAM ACTI 6X0.75L W3	Klar-til-brug

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.27/03/2026 da-DK (K02980)